

Saver One P[®]

La professionalità a portata di mano



ami.italia
medical products

Saver One P[®]

La professionalità a portata di mano

Ogni anno in Europa circa 700.000 persone sono colpite da arresto cardiaco improvviso (SCA). L'arresto cardiaco può affliggere chiunque senza preavviso ed in qualsiasi situazione, indipendentemente dall'età, dal sesso, dal luogo, dalle condizioni fisiche e, trattare tempestivamente in loco diventa un obbligo per la sopravvivenza.

Nasce così **Saver One P**, un Defibrillatore con tecnologie all'avanguardia, versatile e maneggevole, indicato per i professionisti dell'emergenza ma al tempo stesso utilizzabile anche da paramedici o soccorritori addestrati.

MANUALE o SEMIAUTOMATICO

altamente versatile con doppia modalità

Saver One P DEFIBRILLATORE Professionale!

In modalità manuale è in grado di soddisfare le richieste del professionista più esigente. Un menù di navigazione consente all'operatore di gestire autonomamente il soccorso scegliendo tempi, modi e intensità del trattamento.

Sofisticato ma pratico, il **Saver One P** è stato progettato con tecnologie innovative ed è equipaggiato con un software intuitivo multilingue di elementare utilizzo in ogni scenario, sia dentro che fuori le strutture sanitarie: dall'ambulanza al laboratorio o studio medico per proseguire presso il dentista, la farmacia, sulla nave o nei campi militari.



Piccolo e leggero, facilmente trasportabile, è la soluzione ideale anche per un utilizzo mobile, all'aperto ed in luoghi particolarmente rumorosi in quanto combina chiare istruzioni vocali a testo leggibile su un ampio display retro-illuminato.

Il Defibrillatore **Saver One P** consente al professionista dell'emergenza di gestire il soccorso in maniera autonoma potendo scegliere il livello di energia da erogare da 50 a 360 Joules, selezionare la modalità sincrona o asincrona, determinare la lingua o verificare lo status del dispositivo.

Inoltre, sempre in modalità manuale, la guida vocale alla RCP viene automaticamente disabilitata e l'operatore, navigando nel menù, può adattare la luminosità del display ed il volume in base alle condizioni ambientali circostanti.

La tastiera a membrana con duraswitch domes garantisce una navigazione tattile duratura nel tempo e di provata affidabilità.

Saver One P dialoga in modalità wireless con una stampante mediante porta IrDA e può memorizzare fino a 80 ore di ECG, eventi e registrazioni ambientali da scaricare sul PC e gestire con software appropriato.

Saver One P all'occorrenza DAE !

Massima flessibilità nell'adattarsi ad ogni circostanza. In modalità semiautomatica, il **Saver One P** funziona come un normale Defibrillatore Semiautomatico esterno che guida l'operatore in ogni fase del soccorso, dall'applicazione degli elettrodi al paziente, alla defibrillazione, fino alla resuscitazione cardiopolmonare.



Tecnologia BTE e shock immediato


Il **Saver One P** è stato concepito per essere utilizzato sia da paramedici che da medici esigenti ed è stato progettato per erogare un elevato numero di scariche di defibrillazione su pazienti adulti o pediatrici.

Se consigliata, la scarica è pronta in pochissimi secondi.

Un algoritmo ampiamente testato analizza in maniera estremamente accurata e rapida l'attività cardiaca e consiglia o meno l'erogazione della scarica.

Saver One P utilizza la forma d'onda BTE (Bifasica Esponenziale Tronca); una dose di bassa energia a corrente bidirezionale che si adatta all'impedenza del paziente. Altamente efficace ed al tempo stesso ben tollerata dal cuore.

Una tecnologia testata e di sicuro effetto che, se paragonata alla forma d'onda monofasica, è in grado di fornire prestazioni più elevate a parità di energia e di minimizzare le disfunzioni cardiache della post-defibrillazione.

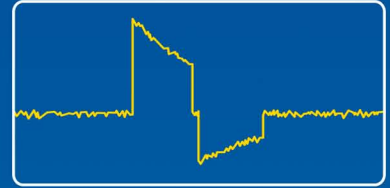

Saver One P

Aggiornato alle nuove Linee Guida
AHA/ERC 2010

- Tastiera in duraswitch che garantisce una navigazione tattile duratura nel tempo
- Display LCD da 5.7" ad alta risoluzione retro-illuminato a LED
- Intuitivo e di facile interpretazione combina istruzioni vocali a testo descrittivo
- Struttura esterna resistente agli urti, alla penetrazione dell'acqua e della polvere
- Estremamente compatto (26,5 x 21,5 x 7,5 cm) e leggero (< 2 kg) di facile trasporto
- Maneggevole ed efficace da utilizzarsi ovunque, anche in condizioni di elevata criticità
- Non richiede particolari programmi di manutenzione a garanzia di pronta risposta all'uso
- Auto-test giornalieri, mensili e semestrali con indicatori di stato che ne confermano la funzionalità
- Due versioni, 200J o Power 360J, per meglio rispondere alle diverse esigenze del mercato
- Batterie monouso a lunga durata con 4 anni di autonomia in standby o batterie ricaricabili



Saver One P[®]

La professionalità a portata di mano

Prodotto da:

A.M.I. ITALIA S.r.l.

info@amiitalia.com

www.amiitalia.com

Sede NORD Italia:

Viale Gran Sasso, 11

20131 Milano

Tel. +39.02.205.09.246

Fax. +39.02.295.20.839

Sede SUD Italia:

Via Cupa Reginella, 15

80010 Quarto

Tel. +39 081.806.05.74

Fax. +39 081.876.47.69



ami.italia
medical products



IMQ mark for
Safety & Quality

CE
0051

Manufactured in Italy